



IPeX ОТ КОМПАНИИ NSK

ЦИФРОВОЙ АПЕКСЛОКАТОР

iPex

МГНОВЕННОЕ И ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ



Новый усовершенствованный цифровой апекслокатор от NSK разработан для точного измерения длины канала в любых средах, включая сухие, влажные или при наличии крови в канале.



Powerful Partners®




Точный цифровой апекслокатор

Новый усовершенствованный цифровой определитель верхушки корня (апекслокатор) от NSK точно измеряет длину любого корневого канала и исключает недостатки, имеющиеся в аналогичных приборах. Технология многочастотного измерения апекслокатора iPex фильтрует посторонние сигналы, возникающие в нелинейных каналах, и прочие нестандартные сигналы. iPex автоматически выбирает наилучшие комбинации частот в соответствии с состоянием корневого канала пациента.

- Мгновенные точные измерения длины канала
- Удобный для пользователя интерфейс
- Большой ЖК-дисплей для удобного мониторинга
- Компактная и интеллектуальная конструкция
- Звуковая система предупреждения
- Автоматическое отключение питания
- Питание от аккумуляторных батарей AAA
- Отсутствие необходимости ручной калибровки

Большой экран в сочетании со звуковыми сигналами для точного измерения

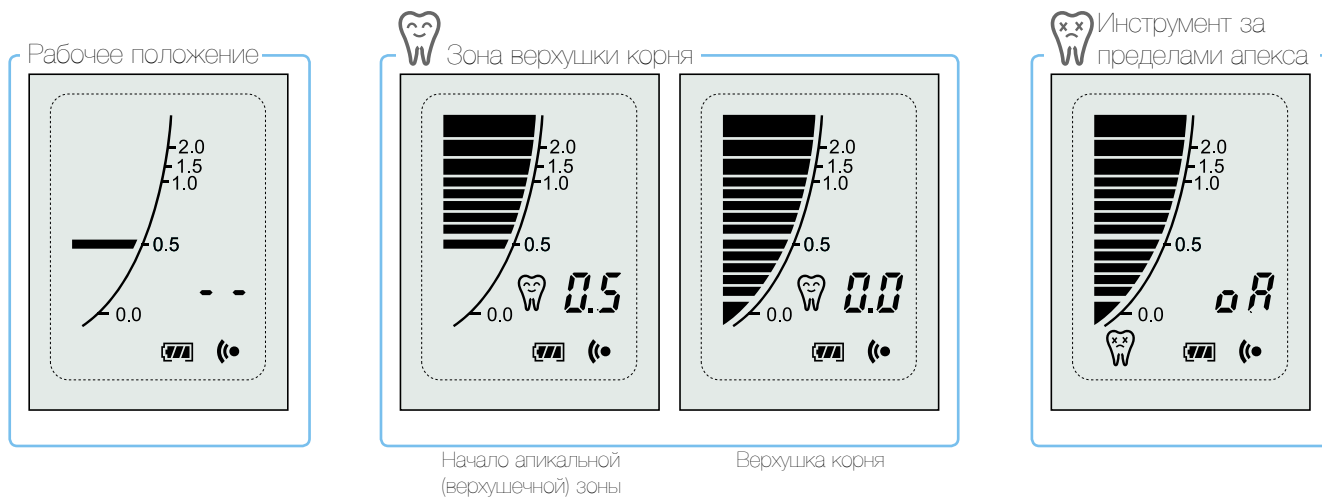

Полный комплект iPex

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
iPex	Y141-251

Комплектация

- Блок управления
- Зонд
- Держатель файла (3 шт.)
- Загубник (3 шт.)
- Удлинительный кабель
- Аккумуляторные батареи AAA (4 шт.)

Технические характеристики

- Питание: для 1,5В батарей AAA (LR03 или R03)
- Непрерывная работа: примерно 50 часов
- Размеры: Ш80 x Д80 x В95 мм
- Вес блока: 185 г



Держатель файла, загубник и удлинительный кабель можно автоклавировать при 135 °С.

NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Japan
TEL : +81 (0)289-64-3380
FAX : +81 (0)289-62-5636

NSK Rus & CIS

www.nsk-russia.ru

115114, Россия, Москва
Дербеневская наб., 7 стр. 16,
3 этаж
ТЕЛ: +7 (495) 967-96-07
ФАКС: +7 (495) 967-96-08