



VOLVERE VMAX OT NSK
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
БЕСЩЕТОЧНЫЙ МИКРОМОТОР

VOLVERE
Vmax

беспрецедентная мощность



Powerful Partners®

Volvere **Vmax** = Максимальная эффективность

Усовершенствованная версия высокомощного мотора Volvere

Знаменитый мотор Volvere, который считается одной из лучших микромоторных систем для лаборатории, разработан теперь в новой версии, отличающейся наибольшей надежностью, функциональностью и управляемостью. Компания NSK вложила в этот превосходный прибор весь свой многолетний опыт работы. Стильный блок управления Volvere можно устанавливать в горизонтальном и в вертикальном положении, кроме того, он оснащен специальным подвесным держателем для наконечника для еще большей экономии рабочего пространства.



Блок управления



Блок управления Vmax


Мощность: 120 или 230 В переменного тока, 50/60 Гц

Размеры: 95 x 190 x 180 мм

Вес: 2 кг

Уникальный дизайн

Прибор Volvere Vmax может быть установлен в любом удобном для вас месте. В вертикальном положении прибор занимает минимум рабочей поверхности. В горизонтальном положении прибор можно поместить на полку в лаборатории.

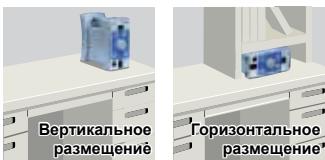

Оптимальное управление при помощи микрокомпьютера

Для производства высокомощного микрокомпьютера и его центрального процессора компания NSK применила весь свой богатый опыт работы в сфере стоматологических лабораторных технологий.

Микрокомпьютер осуществляет высококачественное управление прибором, предоставляя полную информацию о работе мотора и обеспечивая его плавное включение и остановку. При изменении направления вращения во время работы мотора, микрокомпьютер дожидается полной остановки мотора, затем выполняет команду. Мотор включается и останавливается без резких перепадов, что повышает его надежность и делает еще более удобным в применении.

Эргономичный дизайн

Энергопотребление прибора снижено до минимальных значений, что повышает его экологичность. Минимальные потери мощности из-за нагрева и отсутствие вентиляции блока управления обеспечивают тихую работу и высокую эффективность.

Функция автоматической стабилизации скорости

Прибор обладает функцией автоматической стабилизации скорости, что позволяет работать с постоянной скоростью, не нажимая на педаль управления. Эта функция значительно сокращает усталость ноги, возникающую при длительной работе.

Функция вывода кода ошибки

В случае неполадки, перегрузки или неправильного соединения на дисплее высвечивается код неисправности.

Электромагнитная совместимость

Компания NSK заботится об окружающей среде. Прибор полностью соответствует всем Европейским нормам электромагнитной совместимости (European EMC regulations). Мотор не излучает электромагнитные волны или шумы, способные повлиять на работу другого электронного оборудования. Также прибор защищен от электромагнитных волн, излучаемых другими устройствами.

Двойной цифровой дисплей

Двойной цифровой дисплей отображает точную скорость вращения.



Подвесной держатель для наконечника



Подвесной держатель для наконечника (приобретается отдельно)

Дополнительный держатель для наконечника позволяет максимально освободить рабочую поверхность, так как наконечник не занимает места на столе.

Длина держателя регулируется.

Микромотор

Удобный дизайн, минимальная нагрузка на руку

Форма наконечника очень тщательно продумана, в основу его дизайна были положены эргономика и функциональность. Превосходная балансировка наконечника позволяет значительно снизить утомляемость руки и облегчить работу даже на протяжении длительного времени.

Специальный встроенный механизм защиты от пыли

Наконечник оснащен специальным запатентованным защитным механизмом, предотвращающим попадание ионных веществ внутрь. Это увеличивает срок службы наконечника.

Высокая точность

Благодаря высокоточным технологиям компании NSK уровень возможного отклонения осевого стержня сокращен до 0,02 мм. Прибор является идеальным для выполнения особо точных работ.

Легкий и компактный наконечник

Наконечник Volvere Vmax легкий и компактный и идеально подходит для любой руки. Все это обеспечивает удобство и простоту использования.

Низкий уровень шума и вибраций

Высокоточные технологии, применяемые компанией NSK, создают оптимальную рабочую среду с минимальным уровнем шума и вибраций. Отсутствие вибраций способствует повышенной точности работы.

Стандартный микромотор


Скорость вращения: 1 000-35 000 об/мин

Высокомощный, высокоэффективный бесколлекторный микромотор

Бесколлекторный микромотор, которым оснащается прибор Volvere Vmax, обладает меньшим вращательным движением. Это способствует наилучшей регуляции скорости вращения и сокращает перепады вращения. Кроме того, микромотор обладает высокой мощностью и сохраняет постоянный уровень скорости даже на высоких скоростях.



Комплекты VOLVERE Vmax

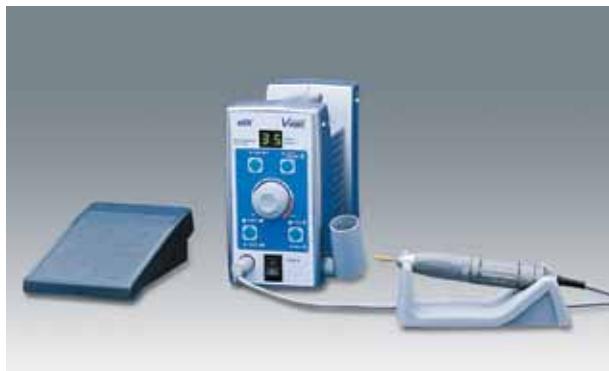

Система со стандартным микромотором

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Комплект Vmax35RV (120В)	Y140867
Комплект Vmax35RV (230В)	Y140868

Комплектация

- Блок управления Volvere Vmax
- Наконечник с микромотором (UHR35)
- Педаль (FC-40)
- Держатель для наконечника
- Подставка для наконечника

Система с микромотором E-типа

МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
Комплект Vmax35VR-E (120В)	Y140898
Комплект Vmax35VR-E (230В)	Y140899

Комплектация

- Блок управления Volvere Vmax
- Наконечник с микромотором (VR-E)
- Педаль (FC-40)
- Держатель для наконечника
- Подставка для наконечника

Технические характеристики:

Блок управления	Стандартный тип микромотора с наконечником	Микромотор E-типа с наконечником
<ul style="list-style-type: none"> • Питание: 120 или 230 В переменного тока, 50/60 Гц • Размеры: ш 95 х д 190 х в 180 мм • Вес: 2 кг 	<ul style="list-style-type: none"> • Скорость: 1 000-35 000 об/мин • Макс. мощность: 71 Вт • Макс. крутящий момент: 4,1 Н·см • Размеры: д 130 x Ø 24,5 мм • Вес: 200 г (без кабеля) • Длина кабеля: 1,2 м 	<ul style="list-style-type: none"> • Скорость: 1 000-35 000 об/мин • Макс. мощность: 71 Вт • Макс. крутящий момент: 4,1 Н·см • Размеры: д 150 x Ø 24,5 мм • Вес: 223 г (без кабеля) • Длина кабеля: 1,2 м

Запчасти

МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА	МОДЕЛЬ	ИЗДЕЛИЕ	КОД ЗАКАЗА
Блок управления Vmax (с кабелем, держателем наконечника и подставкой для наконечника)		Y140884(120В) Y140885(230В)	Цанга-2.35A		H203180
GX35RM и SCD Стандартный микромотор с кабелем для UHR35		E205	Подставка для наконечника (ключ в комплект не входит)		Z095201
GX35EM и SCD Микромотор E-типа с кабелем для VR-E		E054	Держатель для наконечника		Y900140
GX35RM Стандартный микромотор для UHR35		E205015	FC-40 Педаль		Z056
GX35EM Микромотор E-типа для VR-E		E054015	Подвесной держатель для наконечника Vmax		Z246
UHR35 Наконечник		H214	Vmax35SCD Прямой кабель		Z257012
VR-E Наконечник E-типа		H178	Vmax35CCD Витой кабель		Z257013
Карбоновые щетки для GX35M / GX35EM (2 штуки в комплекте)		E023011S	Ключ для цанги		K015751

NAKANISHI INC.

www.nsk-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Япония
TEL.: +81 (0)289-64-3380
ФАКС: +81 (0)289-62-5636

NSK Rus & CIS

www.nsk-russia.ru

115114, Россия, Москва,
Дербеневская наб., 7,
стр. 16, 3 этаж
TEL.: +7 (495) 967-96-07
ФАКС: +7 (495) 967-96-08